


1 Debridman sonrası uygun ölçüde yara örtüsünü seçin.



2 Yara örtüsünü doğrudan yara üzerine uygulayın.

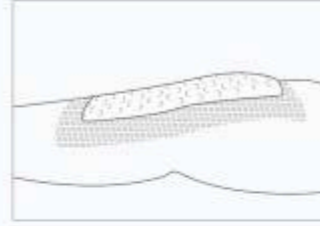

3 Gerekirse pansumanı uygun bandaj veya bant ile sabitleyin.



Tip	Ref Kodu	Ölçü (cm)	Ölçü (in)
Adhesive	OP080060A	8 x 6 (5 x 3)	3.2" x 2.4" (2" x 1.2")
	OP100090A	10 x 9 (6 x 4.5)	4" x 3.6" (2.4" x 1.8")
	OP150090A	15 x 9 (10 x 4.5)	6" x 3.6" (4" x 1.8")
	OP100100A	10 x 10 (6 x 6)	4" x 4" (2.4" x 2.4")
	OP150100A	15 x 10 (10 x 6)	6" x 4" (4" x 2.4")
	OP200100A	20 x 10 (14.5 x 4.5)	8" x 4" (5.8" x 1.8")
	OP250100A	25 x 10 (19 x 4.5)	10" x 8" (7.6" x 1.8")
	OP300100A	30 x 10 (24 x 4.5)	12" x 8" (9.6" x 1.8")
	OP350100A	35 x 10 (29 x 4.5)	14" x 8" (11.6" x 1.8")
	OP175150A	17.5 x 15 (12.5 x 10)	7" x 6" (5" x 8")
	OP250200A	25 x 20 (19 x 14.5)	10" x 8" (7.6" x 5.8")
	OP500200A	50 x 20 (43 x 14.5)	20" x 8" (17.2" x 5.8")

Açıklama: sözleşme düzenlemesi doğrultusunda özel özellikler.

FORYOU MEDICAL
HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO., LTD

HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO., LTD.
ADD: No.1, Shangxia North Road, Dongjiang Hi-tech Industrial Park, Huizhou, Guangdong, China
TEL: +86-752-5302185 FAX: +86-752-5302088 E-MAIL: medical2@foryougroup.com
en.foryoumedical.com

LUOFUCON®

Silikon Post-Op Yara Örtüsü

FORYOU MEDICAL
for you, for us, for life

Rev: 03/2020A/0

Türkiye Distribütörü
EPITHERA
EPITHERA TIBBİ CİHAZLAR SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Oruç Reis Mah. Giyimkent 4.Sk. No:38/A Pk: 34235
Esenler - İSTANBUL T: +90 212 4382711
E: luofucon@epithera.com.tr

FORYOU MEDICAL
for you, for us, for life



LUOFUCON®

Silikon Post-Op Yara Örtüsü



Ameliyat sonrası yara bakımı için esnek konfor.



LUOFUCON® Ameliyat Sonrası Yara Örtüsü yumuşak, son derece esnek ve emici bir pansumandır. Kanlı cerrahi akıntıları emmek ve hapsetmek amacıyla neredeyse tüm cerrahi yaralarda kullanılır. Yumuşak bir silikon yara temas tabakası, nonwoven fitil tabakası, yüksek emici bir ped ve buhar geçirgen, su geçirmez bir arka filmden oluşur. Silikon yara temas tabakası hipoalerjeniktir ve yaraya yapışmaz. Uygulaması çok kolaydır ve pansuman değişikliklerinde ağrıya neden olmaz.

- Kırmızı yara
- Sarı yara
- Pembe yara
- M: Nem Dengesi

Esnek

Hareket ederken, eklemlerdeki veya zor bölgelerdeki yaralar için endişelenmeyin. Yüksek esneme kapasitesi, mükemmel bir konfor ve uyum yeteneği sağlar.



Hilal Doku Şekli

Üst düzey uyum yeteneği sunan hilal desenli süper emici ped, özel tasarımı sayesinde dinamik bir esneklik yarattığı gibi kullanım sırasında pansumanın bütünlüğünü sağlar. Yatay ve dikey emilim kuvveti de bu açılabilen desenli yapıyla desteklenir.



Koruyucu Arka Film

Yüksek MVTR
Pürüzsüz ve esnek
Su geçirmez & bakteri bariyeri

Süper Emici Tabaka

Olağanüstü emme kapasitesi
Maserasyon riskini en aza indirmeye yardımcı olur
Özel, hilal şeklindeki desenleri dinamik esneklik sağlar

Nonwoven Tabaka

Sıvıları geniş bir yüzeye yayar
Emilim performansını artırır

OptiSil Silikon Yara Temas Tabakası

Tarafımızca geliştirilen silikon jel ve perforasyon teknolojisi
Yara eksüdalarını hızlı ve eşit olarak dağıtır
Nazik ve güvenli bir şekilde ağrısız çıkarma
Epidermal hücreleri soyamaz

OptiSil

Tarafımızca geliştirilen silikon jel ve perforasyon teknolojisi sadece yara yüzeyine nazik bir bakım sağlamakla kalmaz, aynı zamanda eksüdanın pansumanın içine inanılmaz derecede hızlı bir şekilde girmesini sağlar. Çıkarıldıktan sonra etkinlikte hiçbir azalma oluşmaz.

Endikasyonlar

LUOFUCON® Silikon Ameliyat Sonrası Yara Örtüsü; bacak ülserleri, basınç ülserleri, diyabetik ayak ülserleri ve açık cerrahi yaralar dahil olmak üzere orta ila yüksek eksüdasyonlu yaraların tedavisi için endikedir.

Avantajları

- Ameliyat Sonrası Yaralar için mükemmel eksüda yönetimi;
- Eklemler için son derece esnek ve konforlu;
- Pansuman değişikliklerinde ikincil travma yok;
- Yaralara veya sütürlere yapışma yok;
- Doktorlara tek bir hareketle yara muayenesi yapma kolaylığı.

Kontrendikasyonlar

Bu ürünü kuru veya az eksüdalı yaralarda, gözlerde, mukozal zarlarında kullanmayın. Sargı emilim esnasında şiştiğinden kaviteli yaralarda kullanmayın. Üçüncü derece yanıklarda kullanmayın.

Yara Örtüsü veya bileşenlerine karşı alerjisi veya aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.